

Vac Attak™ GREEN

IT	
Detergente per sistema di evacuazione ad alte prestazioni	ISTRUZIONI PER L'USO

Uso previsto:

Vac Attak™ VERDE è un detergente enzimatico per sistema di evacuazione ad alte prestazioni sicuro da utilizzare con tutti i separatori amalgama.

Descrizione del dispositivo:

Premier® Vac Attak™ VERDE è un detergente enzimatico per sistema di evacuazione ad alte prestazioni utilizzato nelle pratiche dentali. Vac Attak™ VERDE è fornito sotto forma di polvere.

Controindicazioni:

Non utilizzare Vac Attak™ GREEN nelle seguenti condizioni:

- Se il contenitore o il tappo è rotto/danneggiato.
- Non utilizzare su strumenti in alluminio anodizzato.

PRECAUZIONI:

- Non miscelare con altri detersanti e contaminanti.
- Evitare l'eccessiva diluizione.
- Conservare il prodotto solo nel contenitore originale.
- Tenere i contenitori ben chiusi quando non in uso.
- Non inserire cucchiai umidi nel contenitore.
- Lavare a fondo la pelle esposta e le mani dopo la manipolazione.

AVVERTENZE:

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Evitare il contatto con gli occhi e l'esposizione prolungata alla cute.
- Non ingerire.

Eventi avversi:

- IN CASO DI INGESTIONE:
 - » Nocivo, può causare nausea e vomito.
 - » Può essere irritante per bocca e gola.
 - » Può causare reazioni di tipo allergico.
- Può causare irritazione cutanea, danni oculari e reazioni allergiche cutanee.

Se si verifica un incidente grave in relazione al dispositivo, segnalarlo al fabbricante e/o all'autorità competente dello Stato membro in cui il prodotto è stato utilizzato.

Contenuto e preparazione:

N. articolo	Specifiche del prodotto
9011995	CAMPIONE di Vac Attak GREEN (1 confezione)
9011105	Vac Attak GREEN (SCATOLA DA 6)
8101105	Vac Attak GREEN singolo barattolo

--	--

Materiali:

Vac Attak Green - Potente formula enzimatica conforme a EPA, all'aroma fresco di agrumi

ISTRUZIONI PER L'USO:

- Riempire il pozzetto di evacuazione o un altro contenitore con 32 once (946 ml) di acqua di rubinetto calda.
- Prelevare dal contenitore un cucchiaino (8 g) di detergente in polvere.
- Spargere la polvere sull'acqua, lasciando che si sciolga completamente (30-45 secondi).
- Sciacquare il sistema con la soluzione.
- Una volta pulito, sciacquare nuovamente il sistema con acqua corrente.

Attenzione:

- La prima volta che viene utilizzato, grazie alla sua efficace azione detergente, Vac Attak GREEN potrebbe determinare il distacco di detriti accumulati nel tempo. Per garantire la massima efficienza, controllare il filtro/la trappola dopo l'uso.
- Ideale per rimuovere tutti i tipi di residui organici.
- Utilizzare ogni giorno una nuova soluzione.

Conservazione:

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta.

Periodo di conservazione:

Vac Attak™ Green non ha un periodo di conservazione.

Smaltimento:

Dopo l'uso, il dispositivo deve essere smaltito come rifiuto medico a rischio biologico in conformità alle linee guida/procedure della struttura o dell'istituto.

Per ulteriori informazioni:

Per consultare la scheda di dati di sicurezza o le istruzioni per l'uso, visitare il sito premierdentalco.com oppure chiamare Premier al numero 610-239-6000.

Simboli	Significato del simbolo
	Fabbricante
	Numero di lotto
	Data e Paese di fabbricazione
	Avvertenza, vedere le Istruzioni per l'uso
	Conservare in un luogo fresco e asciutto
	Evitare la luce solare diretta
	Dispositivo medico
	Numero di catalogo
	Rappresentante autorizzato svizzero
	Rappresentante autorizzato dell'Unione europea

Vac Attak™ GREEN

GR	
Καθαριστικό υψηλής απόδοσης για συστήματα εκκένωσης	Οδηγίες χρήσης

Χρήση για την οποία προορίζεται:

To Vac Attak™ GREEN προορίζεται για χρήση ως ενζυματικό καθαριστικό υψηλής απόδοσης για συστήματα εκκένωσης, το οποίο είναι ασφαλές για χρήση με διαχωριστές αμαλγμάτων.

Περιγραφή τεχνολογικού προϊόντος:

To Premier® Vac Attak™ GREEN είναι ένα ενζυματικό καθαριστικό υψηλής απόδοσης για συστήματα εκκένωσης που χρησιμοποιείται σε οδοντιατρεία. Το Vac Attak™ GREEN παρέχεται σε μορφή σκόνης.

Αντενδείξεις:

Μη χρησιμοποιείτε το Vac Attak™ GREEN υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

- Εάν διαπιστωθεί ότι ο περιέκτης ή το πώμα έχει σπάσει/υποστεί ζημιά
- Δεν πρέπει να το χρησιμοποιείτε σε εργαλεία ανοδιωμένου αλουμινίου

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- Μην αναμειγνύετε με άλλα απορρυπαντικά ή μολυσματικούς παράγοντες
- Αποφύγετε την υπερβολική αραίωση.
- Φυλάσσετε το προϊόν μόνο στον αρχικό του περιέκτη.
- Κρατήστε τους περιέκτες ερμητικά κλειστούς, όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Μην τοποθετείτε υγρό κουτάλι στον περιέκτη.
- Πλύνετε σχολαστικά το εκτεθειμένο δέρμα και τα χέρια μετά τον χειρισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

- Κρατήστε το μακριά από παιδιά.
- Αποφύγετε επαφή με τα μάτια και παρατεταμένη επαφή με το δέρμα.
- Μην καταπίνετε.

Ανεπιθύμητα συμβάντα:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ –
 - » Επιβλαβές, μπορεί να προκαλέσει ναυτία και έμετο.
 - » Μπορεί να είναι ερεθιστικό για το στόμα και τον λαιμό.
 - » Μπορεί να προκαλέσει αντίδραση αλλεργικού τύπου.
- Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος, βλάβη στα μάτια και αλλεργικές δερματικές αντιδράσεις.

Εάν έχει συμβεί κάποιο σοβαρό περιστατικό σε σχέση με το τεχνολογικό προϊόν, αναφέρετε το περιστατικό στον κατασκευαστή ή/και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου χρησιμοποιήθηκε το τεχνολογικό προϊόν.

Περιεχόμενα και διαμόρφωση:

Αρ. είδους	Προδιαγραφές προϊόντος
9011995	Vac Attak GREEN ΔΕΙΓΜΑ (1 συσκ.)
9011105	Vac Attak GREEN (ΘΗΚΗ ΤΩΝ 6)
8101105	Vac Attak GREEN Μεμονωμένο δοχείο

Υλικά:

Ισχυρή ενζυματική σύνθεση συμβατή με EPA και με δροσερό άρωμα εσπεριδοειδών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

- Γεμίστε τον νεροχύτη εκκένωσης ή άλλο δοχείο με 946 ml (32 oz.) ζεστού νερού βρύσης.
- Βγάψτε μια δόση (8 gm) καθαριστικής κονιάς από το δοχείο.
- Σκαρπίστε την κονια σε νερό και αφήστε την 30-45 δευτερόλεπτα να διαλυθεί εντελώς.
- Ξεπλύνετε το σύστημα με διάλυμα.
- Ξεπλύνετε και πάλι το σύστημα με τρεχούμενο νερό μετά τον καθαρισμό.

Προσοχή:

- Κατά την αρχική χρήση, η πανίσχυρη καθαριστική δράση του Vac Attak GREEN μπορεί να προκαλέσει την αποκόλληση των συσσωρευμένων υπολειμμάτων. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει το φίλτρο / παγίδα μετά τη χρήση για μέγιστη αποτελεσματικότητα.
- Αποτελεσματικό σε μεγάλο βαθμό για την αφαίρεση κάθε τύπου οργανικών υπολειμμάτων.
- Χρησιμοποιείτε φρέσκο διάλυμα καθημερινά.

Αποθήκευση:

Φυλάσσετε σε δροσερό, ξηρό χώρο, μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Διάρκεια ζωής κατά την αποθήκευση:

To Vac Attak™ GREEN δεν έχει ημερομηνία λήξης.

Απόρριψη:


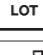








Μετά τη χρήση, Απορρίψτε ως βιολογικά επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες/διαδικασίες του εκάστοτε ιδρύματος.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Για να λάβετε ένα δελτίο δεδομένων ασφαλείας (SDS) ή τις οδηγίες χρήσης (IFU), επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.premierdentalco.com ή καλέστε την Premier στον αριθμό 610-239-6000.

Σύμβολα:

Μια πλήρης επεξήγηση των συμβόλων που χρησιμοποιούνται στη συσκευασία και τη βιβλιογραφία της Premier® Dental βρίσκεται στη διεύθυνση premierdentalco.com/symbol-glossary

Σύμβολα	Σημασία συμβόλου
	Κατασκευαστής
	Κωδικός παρτίδας
	Ημερομηνία και χώρα κατασκευής
	βλ. οδηγίες χρήσης (IFU) στο premierdentalco.com.
	Διατηρώ στεγνό
	Κρατήστε το μακριά από το ηλιακό φως
	Ιατροτεχνολογικό προϊόν
	Αριθμός καταλόγου
	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ελλάδα
	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Vac Attak™ GREEN

LT	
Didelio slėgio siurbimo sistemų valiklis	NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Numatytoji paskirtis:

„Vac Attak™ GREEN“ skirtas naudoti kaip didelio slėgio siurbimo sistemų fermentinis valiklis, naudojamas odontologijoje. „Vac Attak™ GREEN“ tiekiamas mitelelių pavidalo.

Priemonės aprašymas:

„Premier® Vac Attak™ GREEN“ yra didelio slėgio siurbimo sistemų fermentinis valiklis, naudojamas odontologijoje. „Vac Attak™ GREEN“ tiekiamas mitelelių pavidalo.

Kontraindikacijos:

Nenaudokite „Vac Attak™ GREEN“ esant šioms sąlygoms:

- Jei talpa arba dangtelis yra sulūžęs / pažeistas
- Negalima naudoti anoduoto aliuminio instrumentams valyti

ATSARGUMO PRIEMONĖS:

- Nemaišykite su kitais plovikliais ar teršalais.
- Venkite per daug praskiesti.
- Produktą laikykite tik talpoje, kurioje gaminys buvo tiekiamas.
- Nenaudojamas talpas laikykite sandariai uždarytus.
- Nedėkite šlapio kaušelio į talpą.
- Po naudojimo kruopščiai nusiplaukite paveiktą odą ir rankas.

ĮSPĖJIMAI:

- Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Venkite patekimo į akis ir ilgesnio sąlyčio su oda.
- Nenurykite.

Nepageidajami įvykiai:

- PRARIJUS:
 - » Kenksminga, gali sukelti pykinimą ir vėmimą.
 - » Gali dirginti burną ir gerklę.
 - » Gali sukelti alerginę reakciją.
- Gali sudirginti odą, pažeisti akis ir sukelti alergines odos reakcijas.

Jeį įvyko rimtas su priemone susijęs incidentas, praneškite apie įvyki gamintojui ir (arba) valstybės narės, kurioje priemonė buvo naudojama, kompetingai institucijai.

Pakuotės turinys ir sąranka:

Elemento Nr.	Gaminio specifikacijos
9011995	„Vac Attak GREEN“ MĖGINYS (1 vnt.)
9011105	„Vac Attak GREEN“ (6 vnt. DĖŽĖ)
8101105	„Vac Attak GREEN“, vienas indas

Medžiagos:

EPA atitinkanti galinga fermentinė formulė ir šviežias citrinų kvapas.

NAUDOJIMO NURODYMAI:

- Siurbimo sistemos nuotaką ar kitą talpyklę užpildykite 946 ml (32 unc.) šilto vandentiekio vandens.
- Iš talpos pasemkite vieną šaukštelį (8 g) valomųjų mitelių.
- Paberkite mitelius į vandenį ir palaukite 30–45 sekundes, kol visiškai ištirps.
- Tirpalu praplaukite sistemą.
- Išvalytą sistemą dar kartą praplaukite vandentiekio vandeniu.

Dėmesio:

- Po pirmojo naudojimo dėl stipraus „Vac Attak GREEN“ valomojo poveikio gali atsiskirti apnašų sankaupos. Maksimaliam efektyvumui užtikrinti po naudojimo filtrą / gaudyklę patikrinkite.
- Ypač veiksmingas šalinant įvairaus pobūdžio organinius nešvarumus.
- Kasdien naudokite šviežią tirpalą.

Laikymas:

Laikykite vėsioje, sausoje vietoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių.

Tinkamumo laikas:

„Vac Attak™ GREEN“ tinkamumo laikas nėra ribojamas.

Šalinimas:


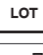
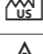




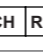
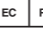

Po naudojimo reikia šalinti kaip biologiskai pavojingas medicinines atliekas pagal įstaigos arba institucijos gaires / procedūras.

Išsamesnė informacija:

Saugos duomenų lapą arba naudojimo instrukciją galima gauti apsilankius adresu: premierdentalco.com, arba paskambinus „Premier“ telefonu: 610-239-6000.

Simboliai

Išsamus simbolių, naudojamų ant „Premier® Dental“ pakuotės ir literatūroje, paaiškinimas pateiktas adresu premierdentalco.com/symbol-glossary

Simboliai	Simbolio reikšmė
	Gamintojas
	Partijos numeris
	Pagaminimo data ir šalis
	Žr. naudojimo instrukciją adresu premierdentalco.com
	Laikyti sausoje vėsioje vietoje
	Saugokite nuo saulės šviesos
	Medicinos priemonė
	Katalogo numeris
	Igaliotasis atstovas Šveicarijoje
	Igaliotasis atstovas Europos Sąjungoje

Vac Attak™ GREEN

TR	
Yüksek Performanslı Kurtarma Sistemi Temizleyici	KULLANIM İÇİN TALIMATLAR

Kullanım Amacı:

Vac Attak™ GREEN, amalgam separatörlerle kullanılması güvenli, yüksek performanslı bir enzimatik kurtarma sistemi temizleyici olarak tasarlanmıştır.

Cihazın Tanımı:

Premier® Vac Attak™ GREEN, diş hekimliği uygulamalarında kullanılan yüksek performanslı bir enzimatik kurtarma sistemi temizleyicisidir. Vac Attak™ GREEN, toz formunda gelir.

Kontrendikasyonlar:

Vac Attak™ GREEN ürününü aşağıdaki koşullarda kullanmayın:

- Kap veya kapak kırık/hasarlı bulunursa
- Anodize alüminyum aletlerle kullanılmamalıdır

ÖNLEMLER:

- Diğer deterjan veya kontaminantlarla karıştırmayın
- Fazla seyreltmekten kaçının.
- Ürünü yalnızca orijinal kabında saklayın.
- Kullanmadığınızda kapları sıkıca kapatarak muhafaza edin.
- Kabın içine ıslak kaşık koymayın.
- Muameleden sonra maruz kalan cildi ve elleri iyice yıkayın.

UYARILAR:

- Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Gözlere ve uzun süreli olarak cilde temasından kaçının.
- Yutmayın.

Advers Olaylar:

- YUTULURSA:
 - » Zararlıdır, mide balantsı ve kusmaya neden olabilir.
 - » Ağız ve boğaz tahriş edebilir.
 - » Alerjik tipte reaksiyona neden olabilir.
- Ciltte tahrişe, gözlerde hasara ve ciltte alerjik tepkilere neden olabilir.

Cihazla ilişkili olarak ciddi bir olayın meydana gelmesi durumunda bu olayı lütfen üreticiye ve/veya cihazın kullandığı Üye Devletin yetkili makamına bildirin.

İçerik ve Kurulum:

Ürün No.	Ürün Spesifikasyonları
9011995	Vac Attak GREEN ÖRNEĞİ (1 paket)
9011105	Vac Attak GREEN (6'Lİ KUTU)
8101105	Vac Attak GREEN Tek Kavanoz

Materyaller:

EPA uyumlu güçlü enzimatik formül ve taze narenciye kokusu.

KULLANMA TALİMATI:

- Kurtarma lavabosuna veya başka bir kaba 946 ml (32 ons) ılık çeşme suyu doldurun.
- Kutudan bir kaşık (8 gm) temizleme tozu alın.
- Tozu suya dağıtarak koyun ve 30 ila 45 saniye iyice çözülmesini bekleyin.
- Sistemi solüsyonla yıkayın.
- Temizledikten sonra sistemi musluk suyuyla yeniden yıkayın.

Dikkat:

- İlk kullanımda Vac Attak GREEN ürününün güçlü temizlik etkisi, birikmiş debrisin yerinden çıkmasına neden olabilir. En iyi performansı elde etmek için her kullanımdan sonra filtreyi kontrol edin.
- Her türlü organik birikimi temizlemede son derece etkilidir.
- Her gün yeni solüsyon kullanın.

Saklama:

Doğrudan güneş ışığından uzakta, serin ve kuru bir yerde saklayın.

Raf Ömrü:

Vac Attak™ Green ürününün raf ömrü süresi yoktur.

Bertaraf Etme:

Kullanımdan sonra tesis veya kurumsal kılavuz ilkeler/prosedürler uyarınca biyotehlikeli tıbbi atık olarak bertaraf edin.

Ek Bilgiler için:

SDS veya kullanma talimatı edinmek için premierdentalco.com adresini ziyaret edin veya 610-239-6000 numaralı telefondan Premier'i arayın.

Semboller:

Premier Dental ambalajında ve literatüründe kullanılan sembollerin tam açıklaması premierdentalco.com/symbol-glossary adresinde yer almaktadır.

Semboller	Sembölün Anlamı
	Üretici firma
	Parti numarası
	Üretim Tarihi ve Ülkesi
	Dikkat: Kullanım talimatına bakın
	Serin, kuru bir yerde saklayın
	Güneş ışığından uzak tutun
	Tıbbi Cihaz
	Katalog Numarası
	İsviçre yetkili temsilcisi
	Avrupa Birliği yetkili temsilcisi